

個人用 透析用水作製装置

MH 500/1000 CX

- | | |
|---------|--|
| 医療 | 個人透析
(病棟・在宅)
ICU/検査
薬材/中材
手術 |
| バイオ | 製薬
化粧品
検査分析 |
| インダストリー | 電子工業
IC/LSI
加湿器 |



特 徴 MH500/1000CX

1 超低圧モジュールの採用で、さらに静かな運転音を実現。

2 コンパクト化・軽量化により移動もよりスムーズ。

3 タッチパネルの採用で操作性がアップ。

4 フラッシングボタンで任意にフラッシングが可能。

5 ハンドル・ホースフックを装備し、扱いやすさが向上。


個人用 透析用水作製装置

MH 500/1000CX

標準仕様

	MH500CX	MH1000CX
標準透過水量(at7℃)	42L/h	72L/h
モジュール形状	4inESPA-FREE	
モジュール本数	1本	2本
プレフィルタ(5μm)	5in×1本	
CAフィルタ(繊維状活性炭)	10in×1本	
警 報	RO入口圧低下・ROポンプ故障・RO水量低下	
外部信号	DC24V/AC100/無電圧接点	
	メタコン接続	
外形寸法(mm)	330W×430D×1,015H	
運転重量(kg)	55	58
最大消費電力	1φ100V 0.2kW(50/60Hz)	
接続口径	原水:3/8"バルブ	
	RO水:1/4"ソケット	
	排水:1/4"ソケット	
原水条件	圧力:0.1~0.3MPa	
	温度:7~30℃	
	水質:水道水(市水)でFI値5未満	
	*原水硬度が高い場合、1次側軟水化処理をご検討ください。	

フローシート

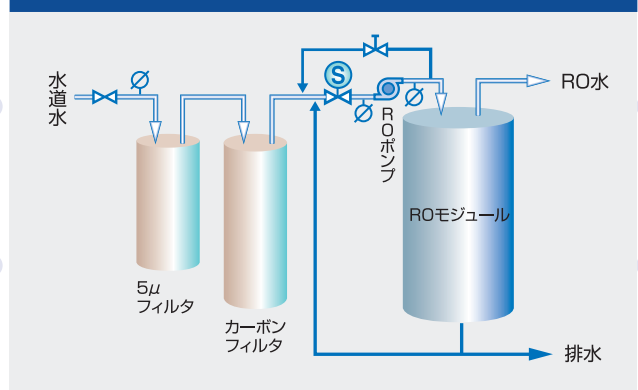

オプション

- 原水加圧ポンプ
- 漏水検知器
- ウィークリータイマ
- 限外ろ過フィルタ

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2020.01



日本ウォーターシステム株式会社

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F
 東 京 支 店 〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22
 大 阪 支 店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12
 北 海 道 営 業 所 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三條5-7-25
 東 北 営 業 所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1
 中 部 営 業 所 〒463-0072 愛知県名古屋守山区金屋2-191-1
 広 島 営 業 所 〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3
 九 州 営 業 所 〒811-0201 福岡県福岡市東区三苫6-1-25
 南九州営業所 〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町27-4 柚木ビル2F
 (株)日本ウォーターシステム四国 〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F
 製造元:株式会社タングラム 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5

TEL.03(4321)0150(代表) FAX.03(4321)0149
 TEL.048(450)3950 FAX.048(466)4313
 TEL.06(6387)1104 FAX.06(6387)3241
 TEL.011(796)8255 FAX.011(796)8256
 TEL.022(288)3112 FAX.022(288)3113
 TEL.052(799)5230 FAX.052(799)5231
 TEL.082(233)9351 FAX.082(233)9357
 TEL.092(605)0555 FAX.092(605)0565
 TEL.099(224)8118 FAX.099(224)8110
 TEL.087(832)5771 FAX.087(832)5772
 TEL.0548(29)0421 FAX.0548(25)0010